



B-BLOWING

Hướng dẫn sử dụng
Titan Lite



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY TRIỆT LÔNG CẦM TAY TITAN LITE TẠI NHÀ

THÔNG TIN AN TOÀN

Để bảo vệ làn da của bạn, máy triệt lông Titan Lite không phù hợp với các điều kiện sau:

- Bạn bị rối loạn cảm giác của da.
- Bạn mắc các bệnh về da, chẳng hạn như viêm da dị ứng, chàm, v.v.
- Bạn bị nhạy cảm với ánh sáng
- Bạn đang trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc cho con bú.
- Bạn bị cháy nắng
- Da nứt nẻ; vảy hoặc vết thương; ung thư da hoặc u máu. Không sử dụng trên hoặc gần mắt của bạn hoặc bất kỳ khu vực thẩm mỹ nhân tạo, bộ phận giả hoặc phẫu thuật tạo hình nào


- Không sử dụng thiết bị nếu bạn có các đốm đen như tàn nhang lớn, nốt ruồi hoặc mụn nước trên vùng da cần triệt lông.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Có gì trong hộp:

- Máy triệt lông Titan Lite
- Bộ đổi nguồn
- Hướng dẫn sử dụng
- Giấy đăng ký bảo hành

2. Mô tả sản phẩm

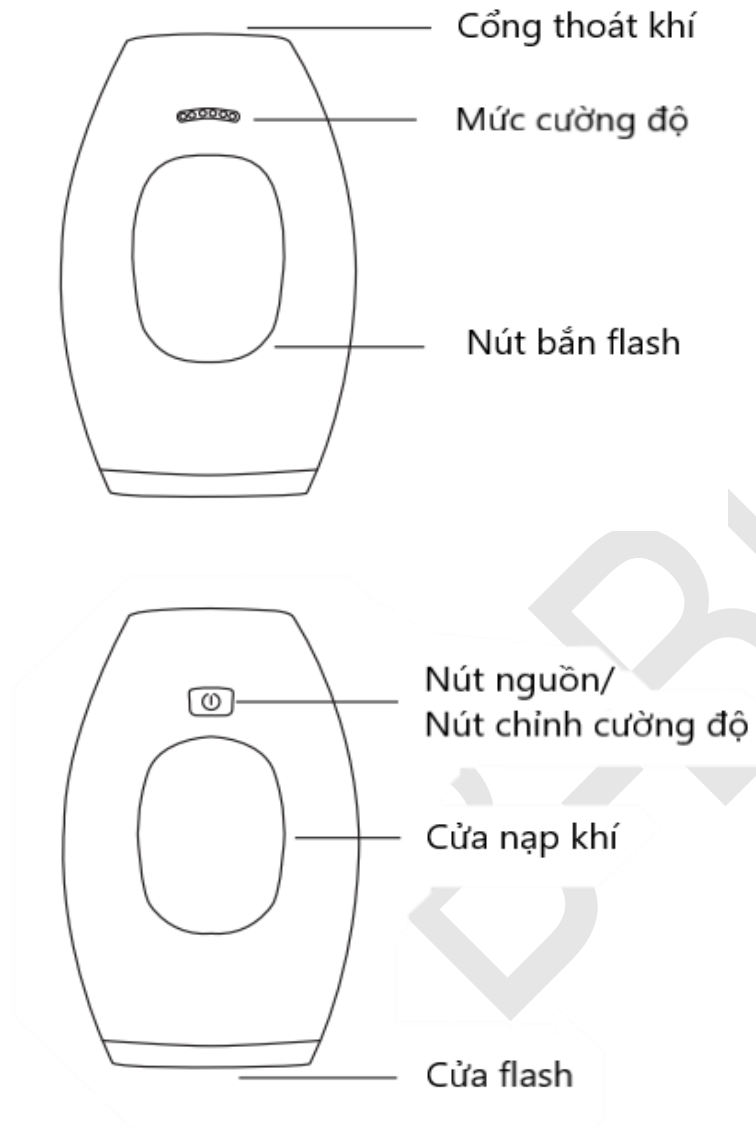

3. Thông số kỹ thuật

Ống đèn	Đèn thạch anh Xemon
Công nghệ	Ánh sáng xung cường độ cao
Mức năng lượng	1.5 - 3.9 J/ cm ²
Kích thước tiêu điểm	33 * 10 mm ²
Bước sóng	470 ~ 1100 nm
Bộ chuyển đổi	100 ~ 240V Đầu vào AC 12V3A/2.5A Đầu ra DC
Nhiệt độ hoạt động	5 ~ 30 °C
Trọng lượng	186g
Kích thước	124*83*48.5 mm ³

4. Chức năng

Máy triệt lông Titan Lite có thể được sử dụng trên bất kỳ bộ phận cơ thể nào: Mặt, Cánh tay, Chân, Nách, Bikini. Vui lòng kiểm tra Bảng màu da và màu lông bên dưới để xác định xem IPL có phù hợp với bạn không:

TÔNG DA

Mô tả	Mức cường độ
Da trắng ngà dễ cháy nắng và không bao giờ sạm da. Thường có màu da rất sáng và mắt sáng	5
Da trắng dễ bị cháy nắng và khó bị sạm da	5
Da trắng cháy nắng, rám nắng vừa phải và đều màu	4
Da màu be ô-liu, rám nắng nhẹ, ít bị cháy nắng	3-4
Da nâu hoặc rám nắng vừa phải, hiếm khi bị cháy nắng và rám nắng	1-2
Da nâu sẫm hoặc đen, không bao giờ bị cháy nắng hoặc sạm nhiều. Thường có màu da rất tối và đôi mắt sẫm màu	Không phù hợp

MÀU LÔNG

	Trắng/ Xám	Không
	Vàng nhạt	Không
	Đỏ	Có
	Nâu sáng	Có
	Nâu	Có
	Nâu sẫm	Có
	Đen	Có

5. Hướng dẫn

- 1) Lau sạch cửa sổ đèn flash bằng khăn tẩm một ít cồn.
- 2) Cắm điện cho thiết bị và nhấn nút màu xanh lá cây ở mặt sau để bật.



- 3) Nút màu xanh lá cây cũng được sử dụng để chuyển đổi qua các mức cường độ (1 cho mức thấp - 5 cho mức cao).
- 4) Đèn màu xanh ở mặt trước sẽ cho biết mức cường độ.
- 5) Hoàn thành kiểm tra tại chỗ của bạn trước khi sử dụng thiết bị.
- 6) Để có kết quả tốt nhất, bạn nên sử dụng thiết bị ở mức cường độ cao nhất có thể mà không gây đau đớn. Tăng dần mức cường độ sau mỗi lần triệt nếu cảm giác không đau.
- 7) Thiết bị có cảm biến và sẽ không nhấp nháy trừ khi cửa sổ đèn flash tiếp xúc trực tiếp với da của bạn. Nếu không tiếp xúc trực tiếp với da của bạn, đèn đỏ sẽ vẫn sáng và thiết bị sẽ không nhấp nháy.
- 8) Để tiến hành triệt, hãy đảm bảo rằng cửa sổ ánh sáng tiếp xúc hoàn toàn đối với da.
- 9) Đèn báo sẽ bắt đầu nhấp nháy sau khi cửa sổ ánh sáng tiếp xúc hoàn toàn lên da của. Điều này cho thấy rằng thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
- 10) Nhấn nút flash.
- 11) Đối với các vùng da có lông dày và cứng, bạn có thể xử lý bằng cách di chuyển thiết bị và thao tác triệt 2-3 lần trên vùng da đó.

- 12) Nhấn và giữ nút màu xanh lá cây ở mặt sau để tắt.
- 13) Để làm sạch thiết bị cầm tay, làm ẩm một miếng vải với vài giọt nước và lau qua cửa sổ ánh sáng. Đảm bảo rằng thiết bị đã được rút phích cắm điện.
- 14) Nếu thiết bị không hoạt động trong 5 phút, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ, hãy nhẹ nhàng nhấn nút nguồn để đánh thức thiết bị. Khi khởi động lại, mức cường độ tự động trở lại mức 1.

Ghi chú:

- Sau khi sử dụng thiết bị thường xuyên, sẽ có một vài đốm trắng nhỏ bên trong cửa sổ đèn flash. Điều này là bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng và tuổi thọ của thiết bị.



6. Chế độ Tự động/ Thủ công

Chế độ mặc định là Thủ công, nhấn nút flash trong 2 giây để chuyển thiết bị sang chế độ Tự động. Dưới chế độ Tự động, thiết bị sẽ tự động nhấp nháy khi phát hiện da. Đèn flash dừng khi thiết bị cách xa da. Để thoát khỏi chế độ Tự động, vui lòng nhấn và giữ nút flash trong 2 giây, sau đó thiết bị trở lại chế độ Thủ công.

7. Bảo vệ quá nhiệt

Quá nhiệt có thể xảy ra nếu thiết bị liên tục sử dụng trong thời gian dài. Trong tình huống này, thiết bị không thể nhấp nháy. Khi chế độ bảo vệ quá nhiệt bắt đầu, quạt tản nhiệt vẫn hoạt động bên trong để giúp hạ nhiệt độ. Vui lòng để thiết bị của bạn nguội khoảng 2-5 phút trước khi tiếp tục sử dụng.

Sau khi nhiệt độ bên trong trở lại bình thường, thiết bị sẽ khởi động lại, nhưng lúc này mức cường độ chuyển sang mức 1, nếu bạn cần mức cường độ cao hơn, bạn có thể tự cài đặt lại.

8. Kiểm tra tại chỗ trước khi sử dụng

Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành kiểm tra tại chỗ trước khi bắt đầu triệt lông toàn thân.

Thử nghiệm tại chỗ nhằm xác định mức độ phù hợp của da bạn với IPL và giúp bạn chọn mức năng lượng tối ưu cho từng vùng da cần triệt.

- 1) Thực hiện kiểm tra tại chỗ trên từng khu vực bạn dự định triệt 48 giờ trước khi triệt lông toàn bộ.
- 2) Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng da của bạn đã được xử lý sạch lông, khô thoáng và sạch sẽ (không có bất kỳ chất cặn bã nào như bột, kem, lớp trang điểm, chất chống mờ hôi hoặc chất khử mùi).
- 3) Thiết lập thiết bị theo hướng dẫn ở trên.
- 4) Đảm bảo rằng cửa sổ ánh sáng tiếp xúc hoàn toàn đối với da.
- 5) Tiến hành triệt thử nghiệm ở mức cường độ 1 bằng cách nhấn nút đèn flash.
- 6) Lấy thiết bị ra khỏi da và đặt nó vào vị trí tiếp theo của khu vực thử nghiệm.



- 7) Sử dụng nút nguồn để tăng mức cường độ và tiếp tục triệt thử nghiệm
- 8) Vui lòng lặp lại các bước 5 - 7 cho đến khi bạn đạt đến mức cường độ tối đa được khuyến nghị cho màu da của bạn. Dừng thử nghiệm nếu bạn nhận thấy bất kỳ phản ứng bất lợi nào.
- 9) Chờ 48 giờ và kiểm tra các khu vực da được thử nghiệm. Nếu da có vẻ bình thường, bạn có thể tiến hành triệt lông toàn diện cho những khu vực đó.

9. Lưu ý

- 1) Không hướng thiết bị hoặc cửa sổ đèn flash vào mắt.
- 2) Không sử dụng thiết bị xung quanh mắt, lông mày hoặc lông mi vì điều này có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng và vĩnh viễn.
- 3) Da bạn bị mẩn đỏ sau khi sử dụng IPL là điều bình thường. Bạn có thể làm mát da bằng nước đá hoặc khăn ướt lạnh.
- 4) Không làm sạch cửa sổ đèn flash trực tiếp bằng bình xịt cồn.

- 5) Không sử dụng với bất kỳ sản phẩm, mỹ phẩm dạng Gel nào.
- 6) Cố gắng không ăn thức ăn chứa nhiều vitamin A, chẳng hạn như rau bina, cải thìa, bông cải xanh Trung Quốc, v.v.
- 7) Để có kết quả tốt nhất, bạn có thể sử dụng mức cường độ cao hơn có thể chấp nhận được mà không làm tổn thương da.
- 8) Tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng trực tiếp (bao gồm cả tắm nắng) trong ít nhất 2 tuần trước và 48 giờ sau khi sử dụng IPL. Nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi triệt lông, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng SPF để bảo vệ làn da của bạn.
- 9) Sau khi sử dụng IPL, vui lòng dưỡng ẩm cho da của bạn bằng kem hoặc lotion không cồn.
- 10) Không sử dụng trong hoặc xung quanh nước.
- 11) Đối với những người sử dụng có màu da sẫm, tối màu, các phản ứng trên da có thể xuất hiện chậm. Vui lòng xem tình trạng da trước khi tăng cường độ.
- 12) Không che cửa nạp khí vào và lỗ thông khí trong khi xử lý IPL.



13) Phần lông còn sót lại trên da khi triệt sẽ làm thiết bị kém thẩm mỹ hơn, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thiết bị

14) Ống đèn bị tối đi là chuyện bình thường, không ảnh hưởng đến việc sử dụng máy.

15) Tránh cất giữ ở những nơi có từ trường mạnh, độ ẩm cao và bụi bẩn hoặc những nơi có nhiệt độ cao.

16) Để xa tầm tay trẻ em. Chúng tôi khuyến cáo rằng thiết bị không được sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 16 tuổi.

17) Không mở hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị bất kỳ lúc nào.

18) Không đập mạnh hoặc tác động lực mạnh vào thiết bị.

19) Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào ngoài chức năng được chỉ định.

B-BLOWING



B-BLOWING

*Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua
website B-Blowing
vn.b-blowing.com*

